
QuickViews spéciales disponibles dans un projet Measure Factory

Description

Les QuickViews utilisables dans les projets Measure Factory sont les suivantes :


QuickViews Time Series

- Calendrier (7.0)
- Date en cours (7.0)
- Intervalle de temps (7.0.42)
- Début d'intervalle de temps définie par l'utilisateur (7.1.17)
- Fin d'intervalle de temps par l'utilisateur (7.1.17)

QuickViews diverses

- Détail (7.0.49, 7.1.20)
- Measure (7.1.29)

QuickView Calendrier :

 [Back](#) [Home](#)

[Calendar](#) [Current Date](#) [Time Range](#) [Time Range Start/End](#) [Detail](#) [Meas](#)

[Calendar](#) [Standard](#)

Year to Date - Current

Admit Year-Month	Total Admissions
Totals	6,460
2021-01	776
2021-02	690
2021-03	794
2021-04	745
2021-05	764
2021-06	780
2021-07	700
2021-08	717
2021-09	494

Factory Current Date:
Current Year Start Mo
Year Complete End M


Pour accéder aux QuickViews spéciales de Measure Factory, ajouter un QuickView Portlet à votre page et l'associer avec un projet Measure Factory dans l'option Utiliser le jeu de QuickViews.

Les QuickViews spéciales sont disponibles en bas de la liste des QuickViews de la boîte de dialogue Édition de QuickView Portlet > Paramètres de la QuickView (si vous avez sélectionné un projet Measure Factory dans Utiliser le jeu de QuickViews).

La QuickView Calendrier Measure Factory vous permet de spécifier le type de calendrier, tel que Standard ou Fiscal.


Les valeurs dans la QuickView Calendrier sont maintenues dans le fichier Factory.

La valeur par défaut pour la QuickView Calendrier est spécifiée dans le fichier Factory.

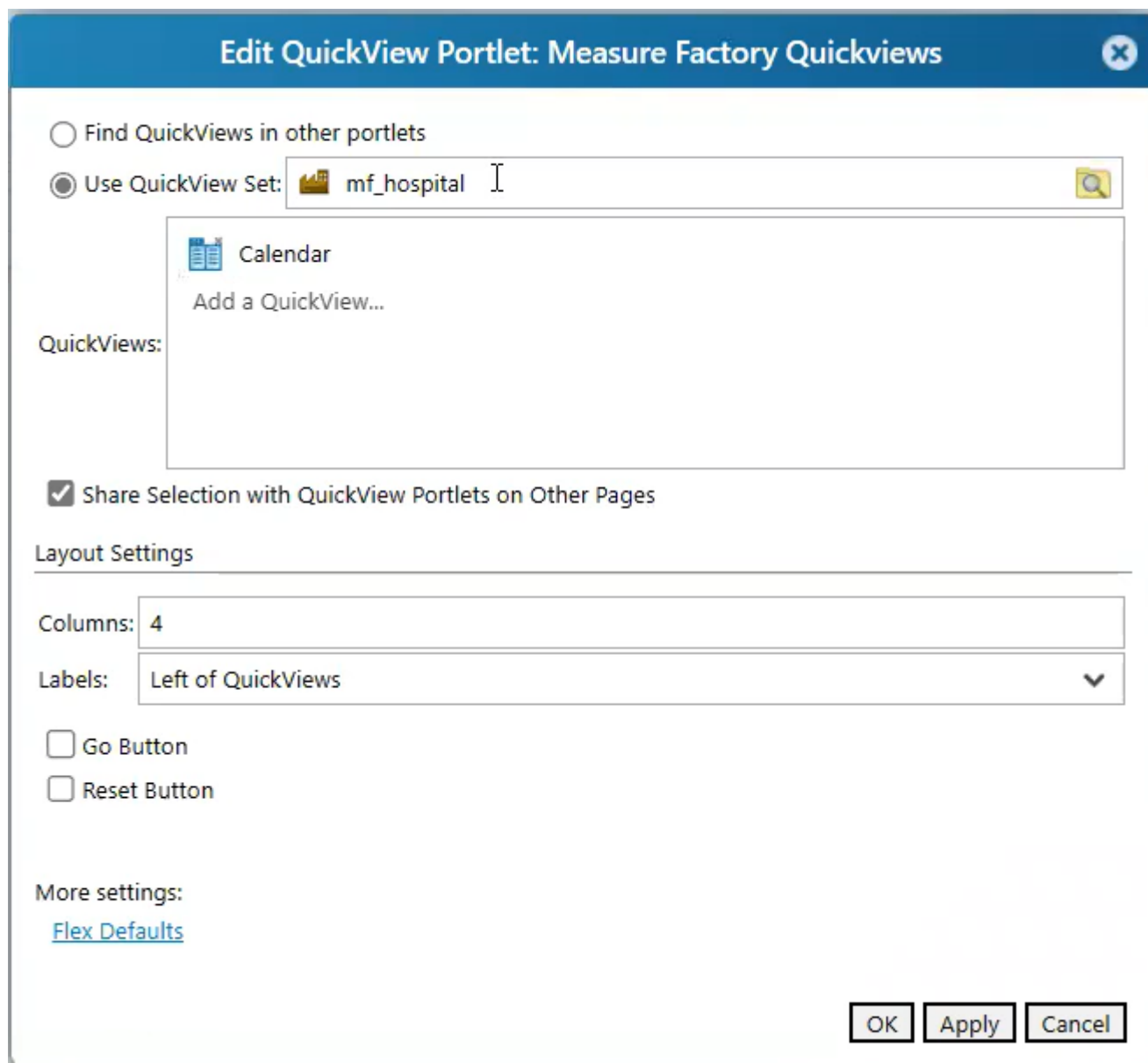


Edit QuickView Portlet: Measure Factory Quickviews

☐ Find QuickViews in other portlets

☒ Use QuickView Set: 


QuickViews:

-  Calendar
Add a QuickView...

☒ Share Selection with QuickView Portlets on Other Pages

Layout Settings

Columns:

Labels: 

☐ Go Button

☐ Reset Button

More settings:
[Flex Defaults](#)

Edit QuickView Portlet: Measure Factory Quickviews

Select QuickViews


- ☐ Zero Charge Flag
- ☐ OR Location
- ☐ Primary OR Procedure
- ☐ Surgery Patient Type
- ☐ Surgery Detail Patient Type
- ☐ Case ID
- ☐ ED Disposition Registration Error Key
- ☐ Attending Provider Flag
- ☐ Blank
- ☐ Calendar
- ☐ Detail
- ☐ Current Date
- ☐ Time Range
- ☐ Time Range Start
- ☐ Time Range End
- ☐ Measure

OK Cancel

Voici ci-dessous un exemple de déclaration de la QuickView Calendrier dans un fichier Factory :

```
cfg.factory X
1=measure-factory {
2   default-current-date from-file="current-date.txt"
3=  calendars {
4     calendar "Standard"
5     calendar "Fiscal" type="Offset October"
6     default-calendar "Standard"
7  }
```

QuickView Date en cours :

 [Back](#) [Home](#)

Calendar

Current Date

Time Range

Time Range Start/End

Detail

Mea

Current Date

Current Date **2021-09-22**

Quickview Current Date

Year Start Month:

Year End Complete Mon

Year to Complete Month - Current

Admit Year-Month	Total Admissions
Totals	5,966
2021-01	776
2021-02	690
2021-03	794
2021-04	745
2021-05	764
2021-06	780
2021-07	700
2021-08	717



Month To Date - Current

Admit Date	Total Admissions
	49
2021/09/01	3
2021/09/02	2
2021/09/03	1
2021/09/04	2
2021/09/05	1
2021/09/06	3
2021/09/07	2
2021/09/08	2
2021/09/09	2
2021/09/10	1
2021/09/11	
2021/09/12	1
-----	---

La QuickView Date en cours vous permet de spécifier une nouvelle date courante devant être utilisée par les Time Series.

Ceci va outrepasser la date courante définie dans le fichier de configuration Factory dans les Portlets associés avec cette QuickView.

Utiliser des groupes d'actions !!!

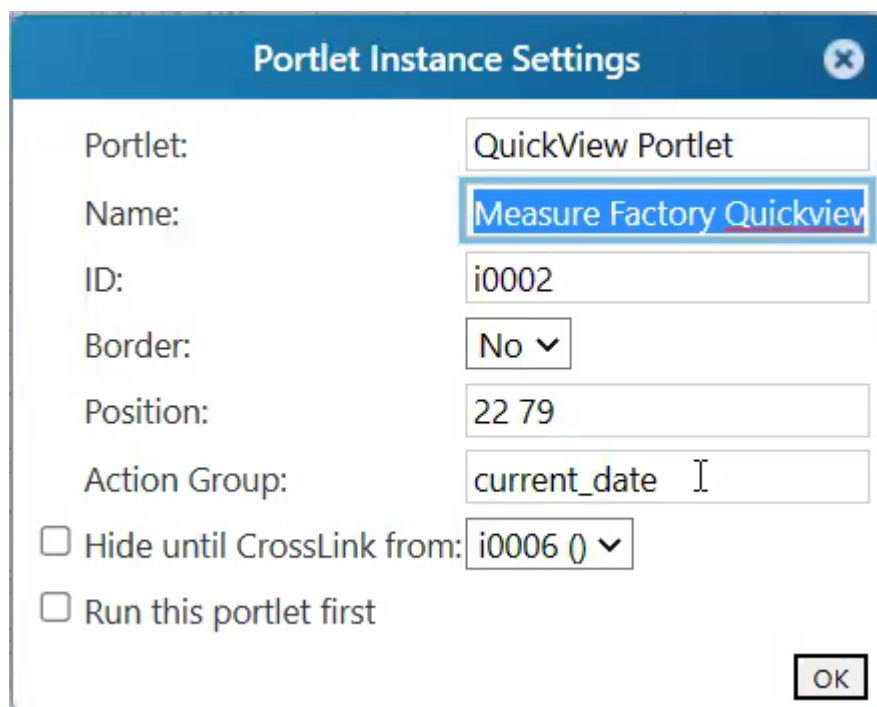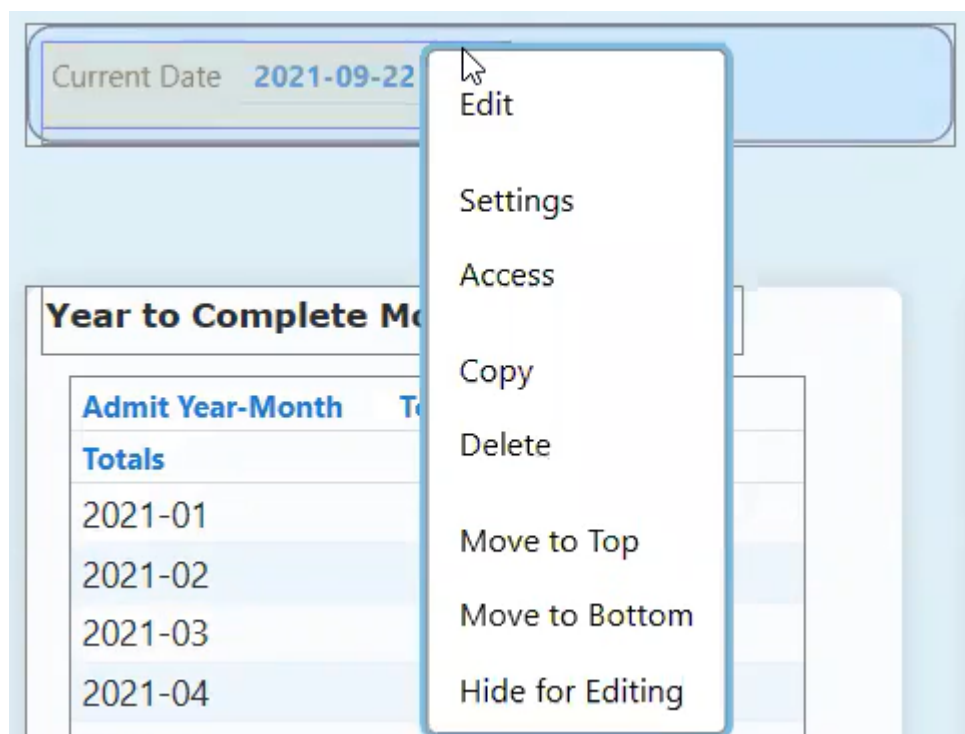

The screenshot shows the "Portlet Instance Settings" dialog box. The dialog has a title bar with a close button. The settings are as follows:

- Portlet: QuickView Portlet
- Name: Measure Factory Quickview
- ID: i0002
- Border: No
- Position: 22 79
- Action Group: current_date
- ☐ Hide until CrossLink from: i0006 ()
- ☐ Run this portlet first

An "OK" button is located at the bottom right of the dialog.

Year to Complete Month - Current	
Admit Year-Month	Total Admissions
Totals	5,966
2021-01	776
2021-02	690
2021-03	794
2021-04	745
2021-05	764
2021-06	780
2021-07	700
2021-08	717

Edit

Settings

Access


Copy

Delete

Move to Top

Move to Bottom


Hide for Editing

Portlet Instance Settings 

Portlet:	Measures Portlet
Name:	<input type="text"/>
ID:	i0001
Border:	No ▾
Position:	33 213
Size:	293 336
Action Group:	current_date <input type="text"/>
Focus index:	0
<input type="checkbox"/> Hide until CrossLink from:	i0006 () ▾
<input type="checkbox"/> Run this portlet first	

OK

QuickView Intervalle de temps :

 [Back](#) [Home](#)

[Calendar](#) [Current Date](#) [Time Range](#) [Time Range Start/End](#) [Detail](#) [Meas](#)

[Time Range](#)

Time Range Year-to-date

Factory Current Date:

Time Range QuickView - Current

Admit Year-Month	Total Admissions
Totals	6,460
2021-01	776
2021-02	690
2021-03	794
2021-04	745
2021-05	764
2021-06	780
2021-07	700
2021-08	717
2021-09	494

Time Range - Previous

Admit Year-Month	Total Admissions
Totals	6,460
2020-01	
2020-02	
2020-03	
2020-04	
2020-05	
2020-06	
2020-07	
2020-08	
2020-09	

La QuickView intervalle de temps permet à l'utilisateur de basculer d'une période de temps de mesures vers une période de temps standard.

Les plages de dates sont maintenues dans le fichier de configuration Factory.


- Current-Day
- Month-To-date

- Quarter-to-Date
- Week-To-Date
- Year-To-Date
- Rolling-Days (nombre)
- Rolling-Months (nombre)
- Rolling-Quarters (nombre)
- Rolling-Years (nombre)

La QuickView par défaut est la première dans la liste.

A associer à un Portlet avec la sélection de QuickView "QuickView d'intervalle de temps" dans l'option Plage de dates du Portlet.

Pour les plages "glissantes" (Rolling), précédent est une plage avec le même nombre de "périodes", finissant sur la "période" avant la valeur de départ de plage de date sélectionnée.

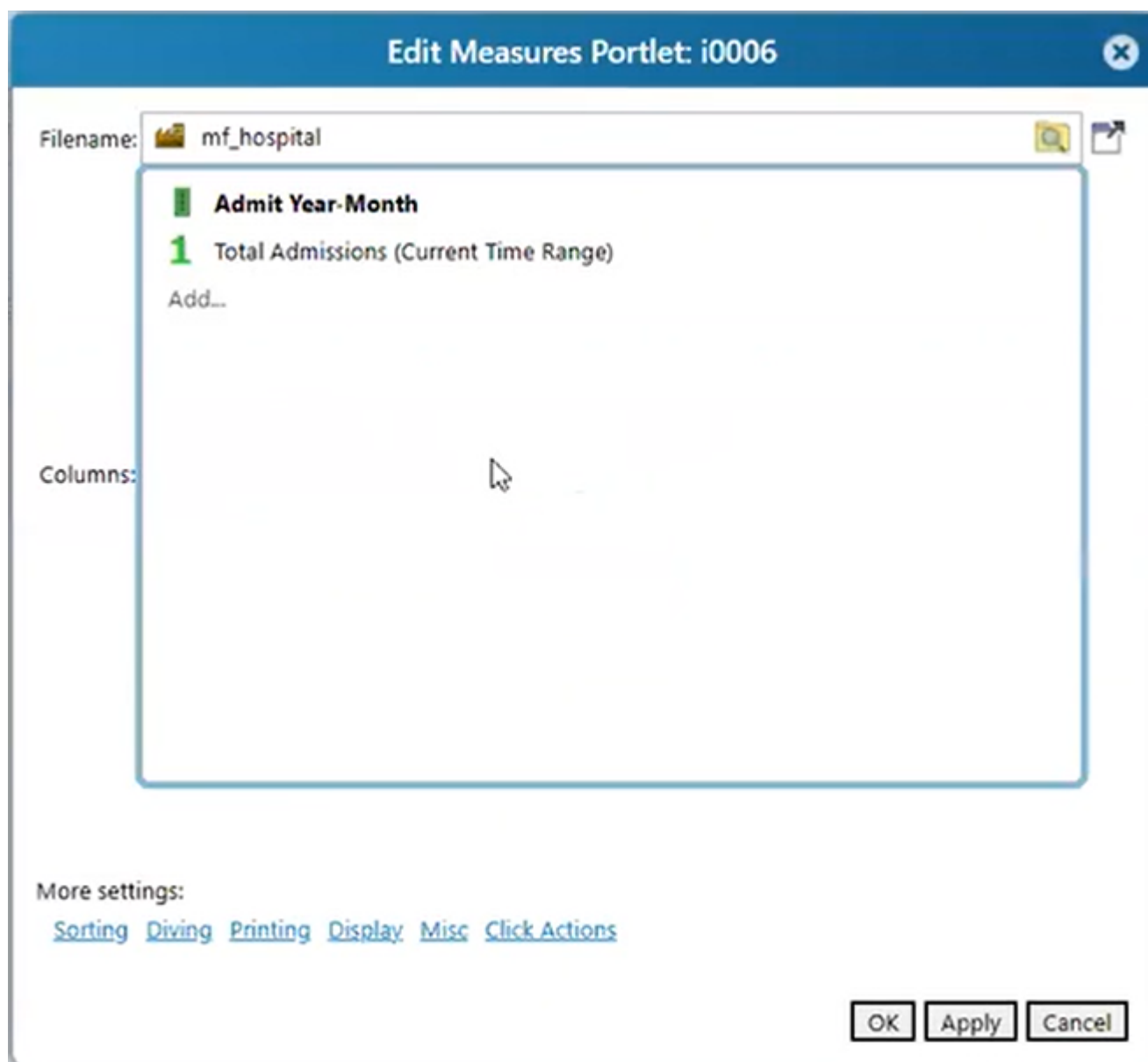

Edit Measures Portlet: i0006

Type:

1 Text

Title:

Automatic

Size:

Automatic

Overflow:

N/A (no size set)

Value:

12

 Total Admissions

Measure Value

Date Range:

Time Range QuickView

Current

Colors:

Any value (no thresholds)

Add a threshold...

More settings:

[Text](#) [Colors](#) [Advanced](#) [Click Actions](#)

OK

Cancel




Edit Measures Portlet: i0006





Type: **1** Text



Title: Automatic

Size: Automatic

Overflow: N/A (no size set)

Value:  **12** Total Admissions  Measure Value 

Date Range:  Time Range QuickView  Current  

Colors:  Ad 

Complete Week

Complete Day

Rolling Year by Month

Year

Future Months

Time Range QuickView

More settings:

[Text](#) [Colors](#) [Advanced](#) [Click Actions](#)

OK

Cancel

QuickView Intervalle de temps avec choix de début et de fin d'intervalle :



Back Home

Calendar

Current Date

Time Range

Time Range Start/End

Detail

Mea

Start and End

Time Range Start **2021/09/22**

Time Range End **2021/09/22**

Factory Current Da

Time Range QuickView - Current

Admit Date	Total Admissions
------------	------------------

	33
--	-----------

2021/09/22	33
------------	----

Edit Measures Portlet: i0006

Type:	1 Text		
Title:	Automatic		
Size:	Automatic		
Overflow:	N/A (no size set)		
Value:	12 Total Admissions	Measure Value	
Date Range:	Time Range QuickView	Current	
Colors:	Any value (no thresholds) Add a threshold...		

More settings:
[Text](#) [Colors](#) [Advanced](#) [Click Actions](#)

OK Cancel

Disponible depuis la version 7.1.17.

Une façon plus élégante pour un utilisateur de sélectionner une plage temporelle spécifique.

Les QuickViews de début et de fin d'intervalle de temps n'affectent pas la date courante. (La date courante n'est pas définie dans la date de fin de l'intervalle de temps).

A nouveau, pour associer un Portlet avec la QuickView sélectionner "QuickView d'intervalle de temps" dans l'option Plage de dates du Portlet.

Quand les QuickViews de début et de fin de l'intervalle de temps sont utilisées, les sélections des QuickViews date en cours et intervalle de temps sont ignorées par la plage de date "QuickView d'intervalle de temps".

QuickView de détail :



[Back](#) [Home](#)

[Calendar](#)

[Current Date](#)

[Time Range](#)

[Time Range Start/End](#)

[Detail](#)

[Measur](#)

Detail [Hide](#)

Factory Current Date

	2021	2020	+/-
Total Admissions	6,460	6,647	-187
Acute Admissions	5,995	6,215	-220
ED Admissions	4,421	4,551	-130

Back

Home

Calendar

Current Date

Time Range

Time Range Start/End

Detail

Measure

Detail

Show


Factory Current Date:


	2021	2020	+/-
LONGWOOD	2,114	2,061	53
MAPLEWOOD HOSPITAL	1,343	1,393	-50
SPRINGFIELD HOSPITAL	1,158	1,256	-98
TRINITY HOSPITAL	1,845	1,937	-92
<i>Total Admissions</i>	<i>6,460</i>	<i>6,647</i>	<i>-187</i>
LONGWOOD	1,856	1,832	24
MAPLEWOOD HOSPITAL	1,251	1,305	-54
SPRINGFIELD HOSPITAL	1,158	1,256	-98
TRINITY HOSPITAL	1,730	1,822	-92
<i>Acute Admissions</i>	<i>5,995</i>	<i>6,215</i>	<i>-220</i>
LONGWOOD	1,265	1,185	80
MAPLEWOOD HOSPITAL	1,034	1,066	-32
SPRINGFIELD HOSPITAL	856	939	-83
TRINITY HOSPITAL	1,266	1,361	-95
<i>ED Admissions</i>	<i>4,421</i>	<i>4,551</i>	<i>-130</i>



La QuickView de détail est utilisée pour **masquer** ou **afficher** des lignes de détail d'un Matrix Portlet.

La sélection par défaut est **Masquer** mais cela peut être modifié dans le QuickView Portlet.

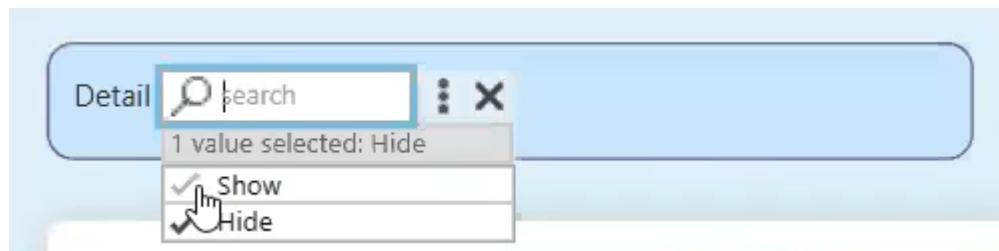


Utiliser des styles sur les mesures pour améliorer l'affichage entre **Masquer** et **Afficher**.







Edit Matrix Portlet: i0001 

Project:  mf_hospital 

Lines:

 Total Admissions by Facility
 Acute Admissions by Facility
 ED Admissions by Facility
Add a measure...
Add a measure group...

Columns:

 **Measures**
 Measure Value - Current YTD
 Measure Value - Previous YTD
 Measure Value - Current Versus Previous YT
Add a column...
Add a column group...

More settings:

[Display](#) [Printing](#) [Click Actions](#)

OK


Apply

Cancel

Edit Matrix Portlet: i0001 ✕

Line settings

Type:


 Detail Line

▼

Name:


Automatic

Measure:

 Total Admissions

▼

Dimension:

 Facility

▼

Style settings

Style:

Simple Total

I

▼

Style (Detail Hidden):

Simple Line

▼

Detail Style:

Simple Line

▼


☐ Hide detail total

☐ Hide if null

OK

Cancel

Measure QuickView :

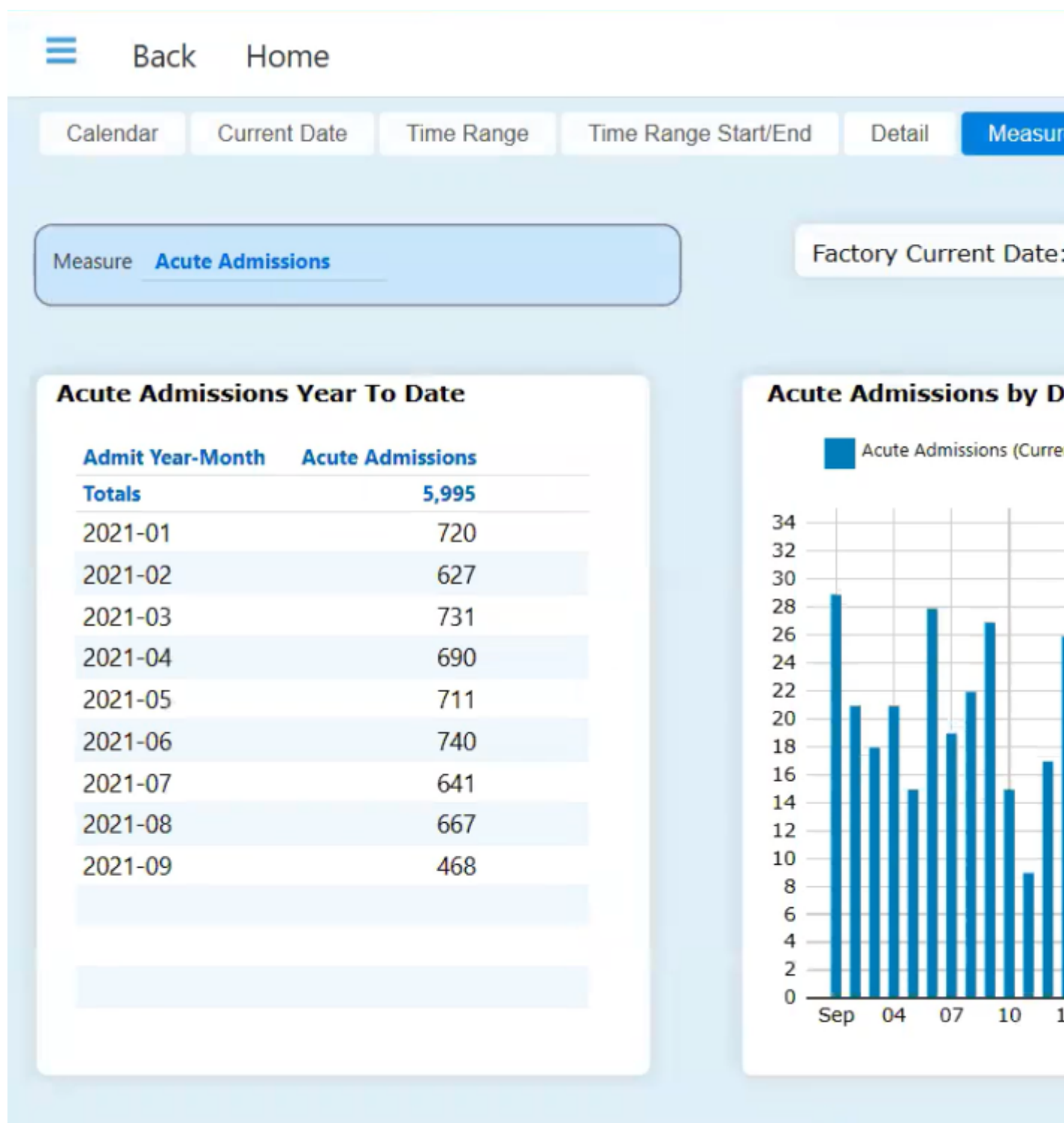

Disponible à partir de la version 7.1.29.

Le Measure QuickView permet à l'utilisateur de basculer la Measure qui sera affichée dans les Portlets associés.

Le QuickView Portlet vous permet de sélectionner les mesures à inclure.

La première mesure listée sera celle par défaut.

Pour associer le Measure QuickView avec d'autres Portlets, utiliser la macro MEASURE_NAME dans d'autres Portlets

Vous devez également fournir une mesure par défaut pour la macro MEASURE_NAME lorsque utilisée.

Edit QuickView Portlet: Measure Factory Quickviews

Find QuickViews in other portlets

Use QuickView Set:

mf_hospital

QuickViews:

Measure

Add a QuickView...

☒ Share Selection with QuickView Portlets on Other Pages

Layout Settings

Columns:

4

Labels:

Left of QuickViews

☐ Go Button

☐ Reset Button

More settings:

[Flex Defaults](#)

OK

Apply

Cancel

Edit QuickView Portlet: Measure Factory Quickviews

QuickView Settings

QuickView:

Measure

Label:

Automatic

Type:

Flex

Collapsibility:

☐ Default (Pull down)

☒ Pull down

☐ Picklist

Measures Settings

Measures:

12 Acute Admissions

12 Total Admissions

12 ED Admissions

Add measures...

More settings:

[Sizing](#) [Advanced](#)

OK

Cancel

Edit QuickView Portlet: Measure Factory Quickviews

Select measures

Hospital Acuity


- ☐ 12 Acute All Payer Case Mix
- ☐ 12 Average LACE Acuity Score
- ☐ 12 Average LACE Comorbidity Score
- ☐ 12 Average LACE ED Score
- ☐ 12 Average LACE LOS Score
- ☐ 12 Average LACE Score
- ☐ 12 Medicare Case Mix
- ☐ 12 Medicare Case Mix Discharges
- ☐ 12 Overall All Payer Case Mix

Hospital Clinical

- ☐ 12 Diagnoses
- ☐ 12 Procedures

Hospital Population


- ☐ 12 AMI Population
- ☐ 12 CABG Population
- ☐ 12 COPD Population

Edit Background Portlet: i0017 

Type:

Size:

Property	Value
Text	* \$(MEASURE_NAME "Total Admissions") Year To D
Text Font	* Verdana 10pt bold ▼
Text Color	■ skin:portletBackgroundTextColor ▼
Justification	Left
Vertical Justification	Center
Rotation	None
Underline Color	transparent ▼
Background Color	transparent ▼
Padding	



Tags

1. Measure Factory
2. QuickView